

signia

StreamLine Mic

Brugsanvisning



Indhold

Før du starter	5
Introduktion	5
Inkluderet i pakken	10
Komponenter	12
Sådan kommer du i gang	14
Opladning	14
Parring af høreapparater	18
Pardannelse med din smartphone eller musikafspiller	20
Ryd pardannelser	22

Daglig brug	23
Tænd og sluk	23
Justering af lydstyrken	24
Sådan slukker du for høreapparatets mikrofoner	25
① Sådan foretager du telefonopkald	26
② Sådan lytter du til musik	30
③ Brug som fjernmikrofon	32
④ Brug som fjernbetjening	35
Vigtige sikkerhedsoplysninger	36
Personsikkerhed	36
Produktsikkerhed	44

Vigtige oplysninger	47
Erklæret formål / Tilsigtet brug	47
Oversigt over status- og strømindikator	48
Forklaring af symboler	52
Vedligeholdelse	54
Tekniske oplysninger	55
Information vedrørende bortskaffelse	57
Oplysninger om CE-mærkning	58

Før du starter



FORSIGTIG

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem og følg sikkerhedsoplysningerne i dette dokument for at undgå skader.

Introduktion

StreamLine Mic bruger Bluetooth®* teknologi, der indeholder følgende funktioner.


* Bluetooth-ordmærket og -logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af den juridiske producent af dette produkt sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

1 Headset til smartphones

Lyd fra din smartphone bliver streamet til dine høreapparater gennem StreamLine Mic.

Din stemme registreres af StreamLine Mic og sendes til din smartphone.


Læs mere i afsnittet „Sådan foretager du telefonopkald“.

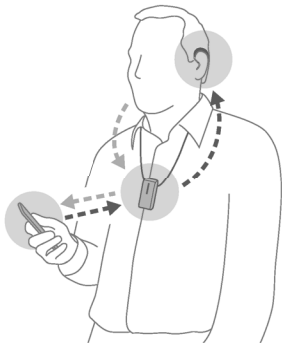

2 Hovedtelefoner til musik

Musik fra din smartphone eller andre StreamLine Mic enheder vil blive streamet til dine høreapparater gennem StreamLine Mic.


Læs mere i afsnittet „Sådan lytter du til musik“.

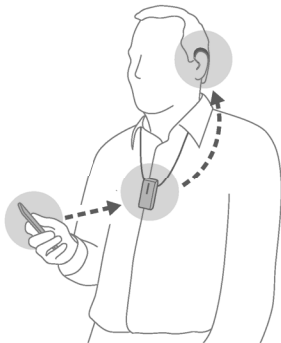

③ Fjernmikrofon

Lyden fra en valgt taler sendes trådløst **fra** StreamLine Mic **til** dine høreapparater.

Læs mere i afsnittet „Brug som fjernmikrofon“.

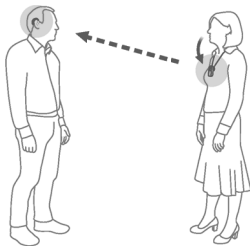


4 Fjernbetjening

Når StreamLine Mic ikke streamer lyd, kan den bruges som fjernbetjening til dine høreapparater.

Læs mere i afsnittet „Brug som fjernbetjening“.


Inkluderet i pakken

- ① StreamLine Mic
- ② Nakkestroppe (forskellige længder)
- ③ USB-kabel til opladning
- ④ USB-strømkabel og strømstik (landespecifikt)

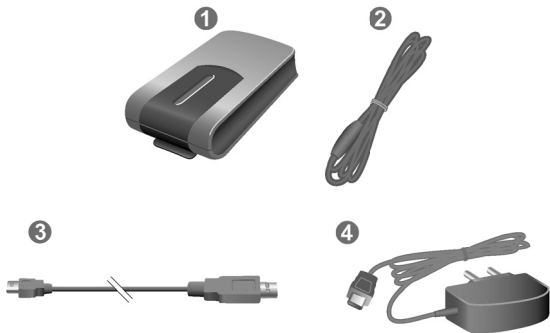

Komponenter

- ① Mikrofoner
- ② Strømindikator 
- ③ Statusindikator 
- ④ Clip (kan roteres)
- ⑤ Multifunktionsknap 
- ⑥ Volumenknapper  og 
- ⑦ USB-port til opladning


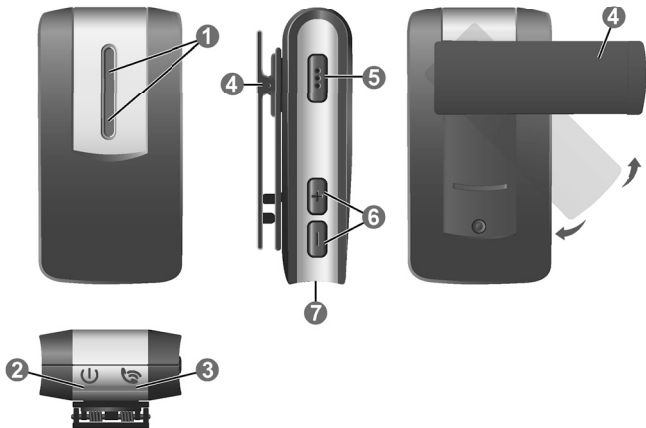


Sådan kommer du i gang

Opladning

StreamLine Mic er delvist opladet ved levering. Oplad den helt, inden den bruges første gang.

Når strømindikatoren  lyser rødt, kan du streame i endnu cirka 30 minutter.

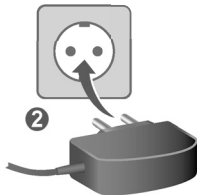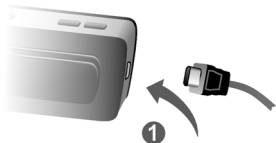

Strømindikatoren viser opladningsstatus:

	Beskrivelse
Rød	Batteriniveauet er lavt
Blinker grønt	Opladning (StreamLine Mic lyser)
Blinker orange	Opladning (StreamLine Mic er slukket)
Grøn slukkes langsomt	Opladning er udført (StreamLine Mic lyser)
Orange	Opladning er udført (StreamLine Mic er slukket)

Yderligere oplysninger:

- En fuld opladning tager typisk 2 timer.
- Sørg for, at strømstikket er let tilgængeligt, så det let kan tages ud af strømforsyningen, hvis det er nødvendigt.



BEMÆRK

- Når du oplader, skal ladeindikatoren lyse som beskrevet i denne brugervejledning. Hvis ladeindikatoren ikke lyser, skal du koble enheden fra opladeren og kontakte din høreapparatspecialist.



BEMÆRK

- ▶ Når du oplader, StreamLine Mic skal du bruge den medfølgende originale strømforsyning 5,0 V/1A, som er CE-mærket og sikkerhedsgodkendt.

Parring af høreapparater

Dine høreapparater skal parres **én gang** med StreamLine Mic. Derefter gemmes parringen i høreapparaterne og huskes hver gang, de tændes.

- ▶ Sørg for, at StreamLine Mic er slukket: Hold knappen  nede, til strømindikatoren  er slukket. Det tager ca. 6 sekunder.
- ▶ Sluk for høreapparaterne, og tænd dem igen:
Åbn og luk batterikamrene. Hvis dine høreapparater ikke har et batterikammer, skal du slukke og tænde dem som beskrevet i høreapparaternes brugsanvisning.
Høreapparaterne er nu klar til pardannelse. Du har 3 minutter til at afslutte parringen.

- ▶ Tænd StreamLine Mic: Hold knappen  nede, til strømindikatorens  grøn. Det tager ca. 3 sekunder. Statusindikatorens  blinker gult.
 - ▶ Placer begge høreapparater tæt på StreamLine Mic (maks. afstand 20 cm). Parringsprocessen startes automatisk.
- Pardannelsen er gennemført, når statusindikatorens er gul.



Pardannelse med din smartphone eller musikafspiller

Din smartphone (eller musikafspiller) skal parres én gang med StreamLine Mic. Derefter etableres forbindelsen automatisk, når StreamLine Mic tændes og er inden for rækkevidde.

- ▶ Hold knapperne  og  inde samtidigt, indtil statusindikatoren  blinker blå. Det tager ca. 6 sekunder. StreamLine Mic er nu klar til pardannelse. Du har 3 minutter til at afslutte parringen.
- ▶ Indstil din smartphone eller musikafspiller til at „søge efter andre Bluetooth enheder“. Se i apparatets brugsanvisning.
- ▶ På din smartphone eller musikafspiller skal du vælge „StreamLine Mic“ fra listen over registrerede enheder.

- Indtast pinkoden „0000“, hvis du bliver bedt om det.
Pardannelsen er gennemført, når statusindikatoren  er blå.

Yderligere oplysninger

- StreamLine Mic kan **parres** med op til otte Bluetooth enheder. Men kun én enhed kan være **tilsluttet** ad gangen.
- Når den er parret med flere enheder,
 - vil StreamLine Mic oprette forbindelse til den første enhed, den registrerer.
 - For at skifte til en anden enhed, skal man deaktivere Bluetooth på den eller de enheder, som man for øjeblikket ikke vil bruge.

Ryd pardannelser

Sådan rydder du alle pardannelser for StreamLine Mic med smartphones og musikafspillere:

- ▶ Sluk StreamLine Mic: Hold knappen  nede, til strømindicatoren  er slukket. Det tager ca. 6 sekunder.
- ▶ Hold samtidig  knappen **og**  knappen **og**  knappen nede i 10 sekunder.

Når parringerne er ryddet, blinker statusindikatoren rødt.
Dine høreapparater forbliver parret med StreamLine Mic.

Daglig brug

Tænd og sluk

Tænd:

- Hold knappen  nede, til strømindikatoren  grøn.
Det tager ca. 3 sekunder.
Statusindikatoren  blinker gult indtil høreapparaterne er forbundet.

Sluk:

- Hold knappen  nede, til strømindikatoren  er slukket. Det tager ca. 6 sekunder.

Justering af lydstyrken

Tryk kortvarigt på  eller  for at justere lydstyrken.

Alt efter dit høreapparats type kan lydstyrken justeres ved at gøre følgende:

- Mulighed 1: Mens lyd streames, justeres kun lyden fra StreamLine Mic (telefonopkald, tale eller musik). Mens der ikke streames lyd, justeres høreapparatets lydstyrke.
- Mulighed 2: Lyden fra StreamLine Mic (telefonopkald, tale eller musik) og lydstyrken for høreapparaterne justeres sammen.

Sådan slukker du for høreapparatets mikrofoner

Hold knappen  nede i 3 sekunder for at slukke høreapparaternes mikrofoner. Kun lyden fra StreamLine Mic afspilles i dine høreapparater.

Alt efter dit høreapparats type kan du slå høreapparatets mikrofoner til igen ved at gøre følgende:

- Mulighed 1: Hold knappen  nede i 3 sekunder.
- Mulighed 2: Tryk kortvarigt på .

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, når StreamLine Mic bruges som en fjernmikrofon.

① Sådan foretager du telefonopkald

Forudsætninger: StreamLine Mic skal være sluttet til en smartphone, og den skal bæres korrekt.

Sådan bærer du StreamLine Mic korrekt



StreamLine Mic skal bæres som vist på billederne for bedst mulig ydeevne. Det er vigtigt, at mikrofonen på StreamLine Mic peger mod din mund, og at StreamLine Mic ikke er dækket af f.eks. tøj.

Maksimal afstand:

- Smartphone — StreamLine Mic: 10 m
- Høreapparater — StreamLine Mic: 2 m

Sådan modtager du et opkald

Du vil høre en ringetone i dine høreapparater.

Statusindikatoren  blinker grønt.

- ▶ Du besvarer/afslutter opkaldet ved at trykke kortvarigt på  eller besvarer/afslutter opkaldet med din smartphone.

Mens du foretager et opkald, er statusindikatoren  grøn.

- ▶ Du afviser et opkald ved at holde knappen  nede i ca. 3 sekunder.

Sådan foretager du et opkald

Når du ringer til en person med din tilsluttede smartphone, streames opkaldet automatisk til dine høreapparater. Mens du foretager et opkald, er statusindikatoren  grøn.

Denne funktion er ikke tilgængelig, når StreamLine Mic bruges som en fjernmikrofon.

Yderligere oplysninger

- **Stemmestyret opkald:** Ved forbindelse til en smartphone skal du trykke to gange på  for at aktivere stemmestyret opkald (hvis det understøttes af smartphonen).
- Til denne form for forbindelse bruger StreamLine Mic Hands-Free Profil (HFP) fra Bluetooth.

② Sådan lytter du til musik

Hvis StreamLine Mic er forbundet til en musikafspiller gennem Bluetooth, vil musikken automatisk blive afspillet i dine høreapparater. Du behøver ikke at betjene noget på StreamLine Mic.

Mens musik streames, er statusindikatoren  orange.

Maksimal afstande:

- Musikafspiller — StreamLine Mic: 10 m
- Høreapparater — StreamLine Mic: 2 m

Start/stop musik

- Brug din smartphone eller musikafspiller til at starte/stoppe musikken.

Du kan også stoppe musikken ved at trykke kortvarigt  på StreamLine Mic.


Yderligere oplysninger

- Til denne form for forbindelse bruger StreamLine Mic Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) fra Bluetooth.
- Hvis musik streames fra din smartphone, vises indgående opkald, mens musik afspilles.

③ Brug som fjernmikrofon

Fjernmikrofonfunktionen starter ikke automatisk. Du skal skifte til fjernmikrofonfunktionen via knappen .

Sådan bærer du StreamLine Mic korrekt

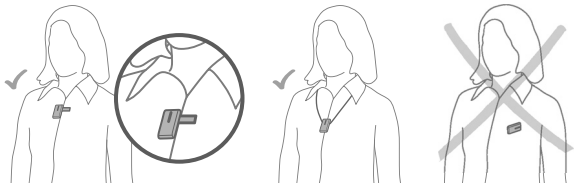

Taleren skal bære StreamLine Mic som vist på billederne for bedst mulig ydeevne. Det er vigtigt, at mikrofonen peger mod talerens mund, og at StreamLine Mic ikke er dækket af f.eks. tøj.

Maksimal afstand:

- Høreapparater — StreamLine Mic: 20 m

Slå fjernmikrofon til

- ▶ Tryk på  i ca. 3 sekunder.

Statusindikatoren  er magenta. Der afspilles en bekræftelsestone i dine høreapparater.

Der tændes for fjernmikrofonerne. Tale fra den person, der bærer StreamLine Mic, streames direkte til dine høreapparater.

Sluk fjernmikrofon

- Hold knappen  nede i ca. 3 sekunder.
Statusindikatoren  er blå (tilsluttet en smartphone) eller gul (ikke tilsluttet en smartphone).

Yderligere oplysninger

- Når du bruger StreamLine Mic som en fjernmikrofon, er der ingen forbindelse til smartphone. Vær især opmærksom på, at indgående opkald ikke vises.
- StreamLine Michar retningsbestemte mikrofoner, dvs. at mikrofonerne registrerer lyden fra en bestemt retning.

④ Brug som fjernbetjening

StreamLine Mic kan også bruges som en fjernbetjening til dine høreapparater: Du kan justere lydstyrken (se afsnittet „Justering af lydstyrken“), slukke høreapparaternes mikrofoner (se afsnittet „Dæmpning af høreapparaternes mikrofoner“) eller skifte til næste lytteprogram (se nedenfor).

Maksimale afstande:

- Høreapparater — StreamLine Mic: 2 m

Sådan skifter du til næste lytteprogram.

► Hold knappen  nede i ca. 3 sekunder.

Denne funktion er ikke tilgængelig, når StreamLine Mic bruges som en fjernmikrofon.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Personsikkerhed



ADVARSEL

Fare for kvælning!

Apparatet indeholder små dele, som kan sluges.

- ▶ Opbevar høreapparater, batterier og tilbehør utilgængeligt for børn og mentalt handicappede.
- ▶ Hvis små dele sluges, skal læge eller hospital straks kontaktes.



ADVARSEL

Risiko for kvælning!

- ▶ Sørg for at nakkestroppen ikke hænger fast i f.eks. bevægelse mekaniske dele på maskiner.
- ▶ Brug kun den medfølgende bruddygtige nakkestrop. Den knækker automatisk, hvis den fastlåses.
- ▶ Brug ikke nakkestroppen til børn under 12 år.



ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød!

- ▶ Enheder, der er åbenlyst beskadigede, må ikke bruges, men skal returneres til høreklubben.



ADVARSEL

Bemærk, at enhver uautoriseret ændring i produktet kan medføre beskadigelse af produktet eller personskade.

- ▶ Brug kun godkendte dele og tilbehør. Kontakt din høreapparatspecialist for at få hjælp.
- ▶ Du må ikke ændre dette produkt uden tilladelse fra producenten.
- ▶ Hvis dette produkt ændres, skal det kontrolleres og testes forsvarligt for at sikre, at det er sikkert at bruge.



ADVARSEL

Sikkerheden ved genopladning af batterier ved hjælp af et USB-stik, afhænger af det eksterne udstyr.

- ▶ Når USB-stikket er tilsluttet udstyr, der er tilsluttet en stikkontakt, skal dette udstyr være UL-godkendt eller overholde IEC 60065, IEC 60950 eller andre tilsvarende sikkerhedsstandarder.



ADVARSEL

Sikkerheden ved brugen af denne enhed, når den er tilsluttet eksternt udstyr (via aux-kabel, USB-kabel eller direkte) afhænger af det eksterne udstyr.

- Ved tilslutning til eksternt udstyr, der er tilsluttet en stikkontakt, skal dette udstyr overholde IEC 60065, IEC 60950 eller andre tilsvarende sikkerhedsstandarder.



ADVARSEL

Risiko for eksplosion, hvis det genopladelige batteri behandles forkert.

- ▶ Du må ikke kortslutte, bryde, mase eller adskille det genopladelige batteri.
- ▶ Læg den ikke i ovn eller ild.
- ▶ Læg den ikke i vand.
- ▶ Genoplad det genopladelige batteri ved temperaturer imellem 0 °C og 45 °C.
- ▶ Indlevér høreapparatet til din høreapparatspecialist med henblik på at få det repareret eller udskiftet batteriet.



ADVARSEL

Aktive implantater

- ▶ Man skal være forsigtig med aktive implantater. Hvis du har et aktivt implantat, skal du kontakte producenten af din implanterede enhed for at få oplysninger om risikoen for forstyrrelser.



ADVARSEL

Trådløst udstyr kan forstyrre måleapparater og elektronisk udstyr.

- ▶ Anvend ikke dit udstyr på fly eller i områder, hvor der anvendes følsomt eller livsopretholdende elektronisk udstyr.



ADVARSEL

Risiko for eksplosion!

- Brug ikke apparatet i omgivelser med eksplosionsfare (f.eks. i mineområder).

Produktsikkerhed



BEMÆRK

- Beskyt apparatet imod stærk varme. Opbevar det ikke i direkte sollys.



BEMÆRK

- Beskyt apparaterne imod høj luftfugtighed.



BEMÆRK

- Tør ikke apparaterne i mikrobølgeovnen.



BEMÆRK

Forskellige typer af kraftig stråling, som f.eks. ved røntgen- og MRI-undersøgelser, nærhed af en inaktiv MRI- eller CT-scanning, kan beskadige enheder.

- Bær ikke høreapparaterne under sådanne eller lignende undersøgelser.

Svagere stråling, som f.eks. fra radioudstyr eller sikkerhedsudstyr i lufthavne, beskadiger ikke enhederne.



I nogle lande gælder restriktioner for brug af trådløst udstyr.

- Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger.



BEMÆRK

Apparaterne er beregnet til at overholde internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, men der kan dog opstå forstyrrelser som følge af elektronisk udstyr i nærheden. I sådanne tilfælde skal du flytte dig væk fra det forstyrrende apparat.

Vigtige oplysninger

Erklæret formål / Tilsigtet brug

Denne enhed er beregnet til brug som en trådløs modtager og sender af lyd mellem høreapparater og det omgivende miljø, herunder tale og trådløse lydenheder. Denne enhed gør det også muligt for brugere af trådløse høreapparater at styre deres høreapparaters funktioner.

Den er beregnet til at blive brugt af børn (> 36 måneder) og voksne sammen med deres høreapparater.

Oversigt over status- og strømindikator

Statusindikator



Beskrivelse



Blinker gult

Søger efter høreapparater.



Gul

Tomgangstilstand: Tilsluttet til høreapparater. **Ikke** forbundet til en smartphone eller anden enhed.



Blinker blå

StreamLine Mic er synlig for en smartphone med henblik på pardannelse.



Beskrivelse



Blå

Telefontilstand: Tilsluttet en smartphone.



Blinker grønt

Indgående opkald.



Grøn

Igangværende opkald.



Orange

Streaming af musik.



Magenta

Fjernmikrofontilstand.



Beskrivelse



Blinkende magenta

Fornytt tilslutning af fjernmikrofon.

Strømindikator



Beskrivelse



Rød

Batteriniveauet er lavt.



Blinker grønt

Oplader, mens den er tændt.

Beskrivelse

 Grøn slukkes langsomt
Opladningen er afsluttet, og StreamLine Mic er tændt.

 Grøn
Tændt, oplader ikke.

 Blinker orange
Oplader, mens den er slukket.

 Orange
Opladningen er afsluttet, og StreamLine Mic er slukket.

Forklaring af symboler

Symboler anvendt i dette dokument



Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Angiver mulig beskadigelse af ting.



Råd og tips til bedre håndtering af din enhed.

Symboler på apparatet eller emballagen



Mærkat om CE-mærkning, bekræfter overholdelse af visse EU-direktiver. Der henvises til afsnittet „Oplysninger om CE-mærkning“.

Symboler på apparatet eller emballagen



Mærkat for overholdelse af regler og standarder vedr. EMC og radiokommunikation, Australien, se afsnittet „Oplysninger om CE-mærkning“.



Indikerer den lovmæssige producent af apparatet.



Smid ikke apparatet ud som almindeligt affald. Læs mere i afsnittet „Information vedrørende bortskaffelse“.



Læs og følg instruktionerne i brugsanvisningen.

Vedligeholdelse



BEMÆRK

- ▶ Fjernbetjeningen må ikke komme i vand!
- ▶ Fjernbetjeningen må ikke rengøres med alkohol eller rensebenzin.



- ▶ Rengør enheden efter behov med en blød klud.
- ▶ Undgå rengøringsvæsker med slibemidler og tilsætningsstoffer som f.eks. citronsyre, ammoniak osv.

Tekniske oplysninger

Kompatible høreapparater

StreamLine Mic fungerer sammen med vores specifikke trådløse høreapparater. Din høreapparatspecialist kan oplyse dig om kompatible modeller.

Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser

Driftsbetingelser

Temperatur	5 til 40 °C (41 til 104 °F)
Relativ fugtighed	15 til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk	700 til 1.060 hPa

Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med længerevarende transport og opbevaring:

Transport og opbevaring

Temperatur	-20 til 70 °C (-4 til 158 °F)
------------	-------------------------------

Atmosfærisk tryk	700 til 1.060 hPa
------------------	-------------------



ADVARSEL

Risiko for skader, brand eller eksplosion under transport.

► Send StreamLine Mic i henhold til lokale forskrifter.

For andre dele som f.eks. høreapparater kan der gælde andre betingelser.

Tekniske data for strømforsyningen

Indgangsspænding:	100-240 V AC
Indgangsstrøm:	maks. 0,2 A ved 100 V AC
Indgangsfrekvens:	47-63 Hz
Udgangsspænding:	5 V DC
Udgangsstrøm:	maks. 1 A

Information vedrørende bortskaffelse

Genbrug enheder, tilbehør og emballage i henhold til lokale forskrifter.

Oplysninger om CE-mærkning

CE-mærket angiver overensstemmelse med følgende europæiske direktiver og forordninger:

- 2017/745 om medicinsk udstyr
- 2014/53/EU om radioudstyr
- 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer

Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringen kan findes på www.wsaud.com/signia.

Trådløs funktion

Denne enhed indeholder en radiotransceiver, der benytter Bluetooth EDR, Bluetooth Low Energy (BLE) og en ophavsretsbeskyttet kortdistanceteknologi, der fungerer ved

2,4 GHz. 2,4 GHz radiosenderen har en lav effekt og er altid under 17 dBm e.i.r.p. i total udstrålet effekt.

Denne enhed overholder internationale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og menneskelig eksponering.

FCC- og ISED-overensstemmelsesinformation kan findes bag på enheden.

ACMA-overensstemmelsesmærket  angiver overensstemmelse med standarderne for elektromagnetisk forstyrrelse, som fastlagt af Australiens myndighed for kommunikation og medier (ACMA).

Udstyr med FCC mærkning er i overensstemmelse med standarderne i FCC angående elektromagnetisk forstyrrelse.

Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

Dette apparat overholder del 15 af FCC-regelsættet samt ISED' licensundtagelse RSS'er.

Den må bruges på følgende to betingelser:

- at apparatet ikke forårsager skadelig interferens, og
- at apparatet ikke påvirkes af interferens fra andre produkter, herunder påvirkning, der medfører uønsket ændring af apparatets funktion.

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt apparat i klasse B iht. del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde forsvarlig beskyttelse mod skadelig støj i et boligområde. Dette udstyr

genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis ikke det installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage generende interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en given installation. Hvis udstyret faktisk forårsager generende interferens i sammenhæng med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, kan interferensen muligvis fjernes ved én eller flere af disse tiltag:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Anbring de to enheder længere fra hinanden.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end den, som højttaleren er tilsluttet.
- Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

FCC forsigtig: Alle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, som har ansvar for standardoverholdelsen, kan gøre brugerens ret til at betjene dette udstyr ugyldig.



Juridisk producent

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Danmark

Din kontakt i Danmark

Signia Høreapparater A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Telefon 63 15 40 00

Document No. 03384-99T05-6200 DA

Order/Item No. 109 520 31

Master Rev05, 08.2024

www.wsaud.com

© 10.2024, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net