



TV-Streamer+

Brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Symboler	5
Lær dit apparat at kende	7
Installation af apparatet	10
Anvendelse af apparatet første gang	12
Sådan aktiverer du streaming	17
Daglig brug	18
Generelle advarsler og forholdsregler	21
Vedligeholdelse	24
Tekniske specifikationer	26
Regulatoriske oplysninger	27
Erklæring	29
Kildeangivelse	31

Introduktion

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du anvender apparatet. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du har spørgsmål.

Anvendelsesformål

TV-Streamer+ er beregnet til at fungere som en trådløs forbindelse mellem dine høreapparater og et tv eller en anden lydenhed.

GN Hearing A/S TV-Streamer+ kan også anvendes sammen med godkendte partnerprodukter fra Cochlear Ltd eller Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Godkendte partnerprodukter henviser til specifikke produkter frigivet og markedsført af Cochlear Ltd- eller Cochlear Bone Anchored Solutions AB-partnere.

Enhver kompatibilitet med godkendte partnerprodukter vil være underlagt og udelukkende være partnerens ansvar.

Målgruppe

TV-Streamer+ er beregnet til brug af lægmænd.

Terapeutiske indikationer

Tilbehøret har ingen terapeutiske indikationer i sig selv.

Kontraindikationen

Ingen kendte kontraindikationer.

Symboler

Symbolerne nedenfor bruges i denne brugsanvisning, på apparatet eller på emballagen.



FORSIGTIG: Angiver en situation, der kan føre til mindre og moderate skader.



ADVARSEL: Påpeger en situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser.



Fremstillingsdato.



Juridisk producent.



Lovpligtig overensstemmelsesmærkning for EU.



Følg brugsanvisningen. (Logo i blåt)



REF Katalognummer.



Unik udstyrsidentifikation.

FCC ID

Enheden er underlagt amerikansk certificering.



Serienummer.



Lovpligtig overensstemmelsesmærkning for Japan.



Lovpligtig overensstemmelsesmærkning for Australien og New Zealand.



Lovpligtig overensstemmelsesmærkning for Malaysia.



Lovpligtig overensstemmelsesmærkning for Taiwan.



Anatel-certificeringsetiketten



Lovpligtig overensstemmelsesmærkning for Korea.

CMIT ID:
XXXXxyzzz

CMIT ID: XXXxyyzzz




Udstyret omfatter en RF-sender.



Følg de lokale forordninger, når du bortskaffer elektroniske enheder.

Lær dit apparat at kende


Udpakning — indhold

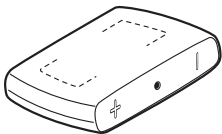


TV-Streamer+




Analogt lydkabel

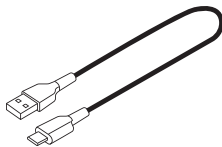

USB-A til USB-C kabel

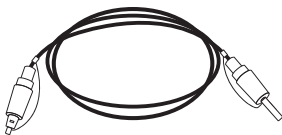

Digitalt (optisk) lydkabel (fjern kabelafdækningerne
før brug)

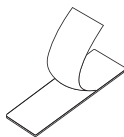


Burrebånd

Beskrivelse


Med denne enhed kan du streame lyd fra dit tv, dit stereoanlæg, din pc eller en lignende enhed direkte til dine høreapparater.

Alt efter dit tv, dit stereoanlæg, din pc eller anden lydopsætning henvises til "Installation af enheden" for installation af TV-Streamer+. Tilslutningsvejledningen viser dig, hvordan du konfigurerer de fysiske forbindelser.

Hovedfunktioner

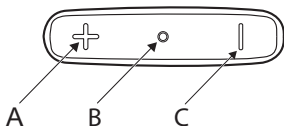

- A. Lydstyrke op
- B. Strømindikator
- C. Lydstyrke ned

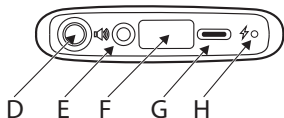

- D. Parrings-/forsinkelsestilstandsknap
- E. Lydindgang: analog eller digital (optisk)
- F. Serienummer
- G. Strømforbindelse: USB-C
- H. LED-indikator: strøm

LED-information

Streaming og parring, grønne LED-lysmønstre.

LED-mønstre



constant ON

Forløb

Streaming

Beskrivelse

Lyser konstant

Standby

Slukket konstant



Parringsindstilling

Blinker



3 seconds

Parring udført

Lyser konstant i 3 sek.



Firmwareopdatering

Blinker hurtigt



Justerbar
forsinkelsestilstand

Blinker langsomt



Softwareproblem
(genstart/nulstilling
påkrævet)

3 mellemlange blink
gentaget



3 seconds

Firmwareopdatering
afsluttet

Lyser konstant i 3
sek.


Installation af apparatet

Tilslut enheden til en strømkilde

Enheden kan få strøm direkte via tv'ets USB-A-port via det medfølgende USB-A-til-USB-C-kabel. Alternativt kan USB-A-stikproppen tilsluttes til enhver passende strømkilde.

USB-C-stikket indsættes i enheden.

LED-lyset på bagsiden af enheden vil lyse hvidt for at indikere aktivering, når strømkablet tilsluttes en strømkilde.

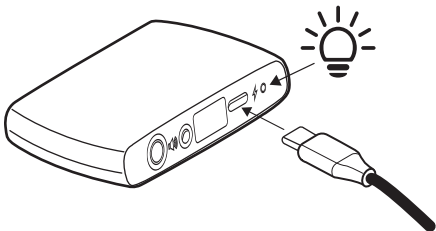


Kabeltilslutningsmuligheder

Du kan enten anvende det analoge lydkabel det digitale (optiske) lydkabel til at forsyne et signal til TV-Streamer+.

Analog kabelforbindelse


For tv med analog lyd: Indsæt 2-i-1-lydstik i L- og R-lydportene på dit tv, og tilslut den anden ende til TV-Streamer+.

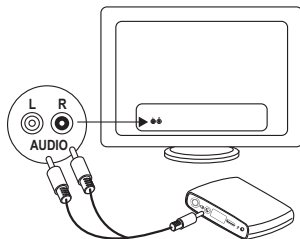

Digital kabelforbindelse

Det digitale (optiske) kabel har en afdækning i begge kablets ender, som skal fjernes før anvendelse.

Indsæt den firkantede stikprop i tv'ets digitale lydudgang og den runde stikprop i TV-Streamer+.

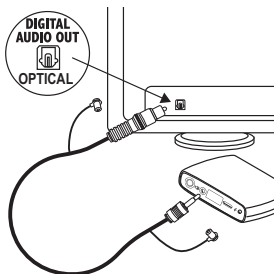

Anvendelse af apparatet første gang

Før du kan begynde at bruge enheden til at streame lyd til dine høreapparater, skal den være sluttet til et strømudtag, sluttet til tv'et og parret med dine høreapparater.

Forbind kun apparatet til forbindelser, som det er beregnet til.


BEMÆRK: Det anbefales at sætte enheden på tv'ets bagside, efter at alle kabler er blevet tilsluttet, og enheden er blevet parret med dine høreapparater

Parring af apparatet med dine høreapparater

For at overføre lyd fra enheden til dine høreapparater skal du parre enheden med dine høreapparater.

BEMÆRK: Sluk for alle høreapparater i nærheden for at undgå utilsigtet parring. Hvis det ikke er muligt at slukke for de høreapparater, der ikke skal parres, så placer dem mindst 1 m (3 fod) fra enheden.

1. Enheden og høreapparaterne skal være tændt og være inden for 5 cm (2 tommer) fra hinanden.
2. Parringstilstand aktiveres ved et hurtigt tryk på parringsknappen på bagsiden af enheden. Tryk på knappen, indtil LED'en begynder at blinke grønt i korte intervaller.
3. Høreapparaterne vil blive parret én del ad gangen.

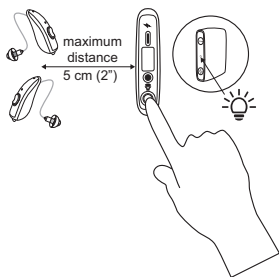

4. LED'en vil automatisk holde op med at blinke i 3 sek., når det første høreapparat er blevet parrat og vil herefter automatisk fortsætte med at parre det andet høreapparat.
5. Når enheden er blevet parret med dine høreapparater, vil den begynde at streame lyd til dine høreapparater, når den er tændt.

LED-parringssekvens

Parringstilstanden for TV-Streamer+ er aktiv i 3 min., men streamingen kan godt begynde, før parringssøgningen er afsluttet.

- Blinkende LED = første parring (ca. 12 sek.)
- Konstant lysende LED
- Blinkende LED = anden parring (ca. 12 sek.)


- Konstant lysende LED
- Blinkende LED = søger efter flere høreapparater (ca. 15 sek.)
- Konstant lysende LED = streaming.

Justering af lydstyrke

Lydniveauet er indstillet til at levere en behagelig lydstyrke fra det øjeblik, enheden aktiveres. Du kan dog altid justere lydniveauet efter behov.

For at justere lydstyrken: Tryk på '+'-knappen for at skrue op for lydstyrken eller på '-'-knappen for at skrue ned for lydstyrken.


Det anbefales at indstille lydstyrken, før du sætter enheden på tv'et.

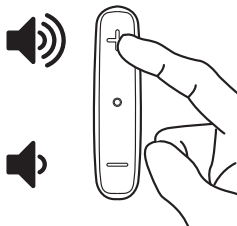


Justerbar forsinkelsestilstand

Visse lydsystemer producerer lyden forsinket. Forsinkelsen kan medføre, at tv'ets billede ikke er synkront med lyden. Forsinkelsestilstanden gør det muligt for dig at synkronisere tv'ets billede med lyden ved at øge eller reducere tiden for lydstreamingen til dine høreapparater.

1. Forsinkelsestilstanden aktiveres, når du har trykket på parrings-/forsinkelsestilstandsknappen i 10 sek. LED'en lyser grønt i lange intervaller for at bekræfte, at du er i forsinkelsestilstand.

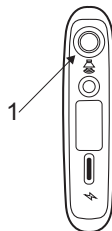

2. Tryk på + eller - for at øge eller reducere lydets forsinkelse fra tv'et.

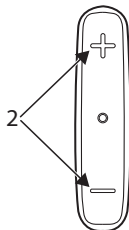


3. For at forlade forsinkelsestilstand skal du trykke på parrings-/forsinkelsestilstandsknappen i 3 sek. eller genstarte TV-Streamer+ ved at tage strømkablet ud og sætte det i igen.

Placering af enheden

Selv om du nærmest kan placere TV-Streamer+ alle steder, der er inden for kablets rækkevidde, så anbefales det at placere TV-Streamer+ på tv'ets bagside.

Fjern plaststykkerne fra burrebåndsstrimlerne, og placer burrebåndet på TV-Streamer+. Fjern det resterende plaststykke fra strimlen, og brug burrebåndsstrimlen til at placere apparatet tæt på kanten eller toppen af tv'et på bagsiden.

- A. Burrebånd
- B. Anbefal placeringsmuligheder for påsætning af TV-Streamer+
- C. Sæt ikke TV-Streamer+ på midt på tv'et

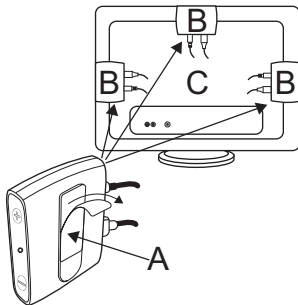

Sådan aktiverer du streaming

BEMÆRK: Sørg for, at din TV-Streamer+ er tændt.

Der er tre måder at streame på.

- Tryk på den konfigurerede trykknop på høreapparatet
- AutoStreaming
- Start i appen.

Din høreapparatspecialist kan konfigurere, hvordan du aktiverer en streaming med høreapparatets trykknop.

Hvad er AutoStreaming?

Når AutoStreaming er aktiveret, vil din TV-Streamer+ automatisk begynde at streame til de parrede høreapparater, når enten TV-Streamer+ eller høreapparaterne er tændt.

AutoStreaming kan aktiveres/deaktiveres i din høreapparatapp eller af din høreapparatspecialist.

Standardindstillingen er OFF for TV-Streamer+.

Daglig brug

Tænd/sluk

Tænd for dit tv. Tryk på den konfigurerede trykknop for at acceptere streamet tv-lyd i dine høreapparater. Hvis der ikke streames lyd, henvises til forrige afsnit 'Sådan aktiverer du streaming'.

Lyden fra tv'et vil så blive blandet med de andre lyde, som dit høreapparat registrerer.

Afbryd tv'ets lyd ved at trykke på høreapparatets konfigurerede trykknop eller slukke for tv'et.

Når TV-Streamer+ ikke bruges i længere perioder, skal du tage strømforsyningen ud af stikkontakten



ADVARSEL: Når du afbryder ledningen, skal du tage fat i stikket og ikke i ledningen.

Andre lydkilder

Du kan anvende TV-Streamer+ sammen med andre enheder, der har kompatible udgange som fx en pc eller andre lydsystemer.

Justering af lydstyrke

Tv'ets lydstyrke kan justeres op/ned på din høreapparater, høreapparatfjernbetjeningen (tilvalg) eller høreapparatappen (tilvalg).

Spørg din høreapparatspecialist om yderligere information om de alternative muligheder for at betjene din TV-Streamer+.

Tilslutning af enhed og høreapparats-appen

Enheden kan styres via samme app som til dine høreapparater.

Det vil gøre det muligt for dig at starte og stoppe streamingen samt justere lydstyrken via appen.

Appen gør det muligt at foretage en række forskellige indstillinger som fx Auracast™-lyd og forsinkelsestilstand.

Appen vil om nødvendigt give besked om firmwareopdateringer og produktforbedringer.

Download appen, eller kontakt din høreapparatspecialist for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Enheder fra partnere har muligvis ikke den samme appfunktionalitet.

Telefonsamtaler

Hvis dine høreapparater er forbundet med din mobilenhed, kan du stadigvæk besvare telefonopkald, når du anvender enheden.

Du vil høre en alarm i dine høreapparater, der signalerer et indgående opkald, og dine høreapparater vil automatisk standse lydsignalet fra enheden, hvis du besvarer det indgående opkald – se brugsanvisningen til dine høreapparater eller partnerapparater for flere oplysninger om, hvordan du besvarer telefonopkald. Høreapparaterne skifter automatisk tilbage til lydsignalet fra enheden, når telefonsamtalen er slut.

Rækkevidde

Afhængigt af høreapparatet er streamingrækkevidden fra enheden til høreapparaterne op til 7 meter (23 ft). Du behøver ikke at kunne se enheden og du kan godt befinde dig i et

andet rum. Imidlertid kan fysiske objekter som fx vægge eller møbler reducere rækkevidden.

Lydsignalet vil standse, hvis høreapparaterne ikke er inden for enhedens rækkevidde. Når høreapparaterne igen er inden for enhedens rækkevidde, vil streamingen automatisk blive genoptaget.

Der er en tidsgrænse på 5 min. til automatisk genoprettelse af forbindelsen. Hvis du er uden for rækkevidde i mere end 5 minutter, skal du genstarte streamingen manuelt via dine høreapparater eller appen.

Denne enhed har en RF-sender, der virker inden for frekvensområdet 2,4 GHz til 2,48 GHz.

Nulstilling af apparat

Hvis LED'en blinker 3 mellemlange blink gentagne gange, kan dette være et softwareproblem, der kræver en genstart af enheden. Dette problem kan løses ved blot at genstarte systemet.

For at genstarte enheden: Afbryd og tilslut strømforsyningen. Hvis fejlen af en eller anden grund fortsat er der flere genstartsforsøg, skal enheden sendes til service.

For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du trykke på og holde lydstyrkeknappen + inde i 10 sek., mens du tænder for enheden.

Generelle advarsler og forholdsregler



ADVARSEL:

- TV-Streamer+ kan blive forstyrret af andet udstyr.
Når du bruger TV-Streamer+ og enheden påvirkes af elektromagnetisk interferens, skal du bevæge sig væk fra kilden.
- Når der benyttes trådløse funktioner, sender din TV-Streamer+ digitalt kodede transmissioner med laveffekt for at kommunikere med andre trådløse enheder. Det er muligt, men ikke sandsynligt, at andre elektroniske apparater påvirkes. Hvis dette sker, skal du fjerne TV-Streamer+ fra den berørte enhed.
- Eksterne enheder, der er forbundet til den elektriske indgang, skal være sikre i henhold til kravene i IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60065, or IEC 60950-1, IEC 62368-1, alt efter hvad der er relevant.
- Det er ikke tilladt at ændre denne enhed.
- Hold apparatet og alle ledninger og kabler væk fra maskiner i drift.
- Hvis enheden overophedes, tabes, beskadiges eller nedsænkes i væske, eller dens strømadapter, kabel eller stik er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den og kontakte din høreapparatspecialist.
- Må ikke anvendes i områder, hvor der er eksplosionsfare, eller hvor der er fare for antændelse af brændbare gasser.

- Undgå at udsætte enheden for regn, fugt eller andre væsker for at beskytte enheden mod skader og dig mod personskade.
- Høreapparater og enheder samt eventuelle dele, batterier og magneter skal opbevares utilgængeligt for dyr, børn og personer med nedsatte kognitive, intellektuelle eller mentale evner.
- Brug altid den nyeste tilgængelige softwareopdatering til din enhed.



FORSIGTIG:

- Elektronisk udstyr, større elektroniske installationer og metalkonstruktioner kan reducere dækningen betragteligt.
- Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden pga. interferens, skal du bevæge dig væk derfra.
- Brug kun originalt GN Hearing A/S-tilbehør.
- Må ikke benyttes på steder, hvor det er forbudt at anvende elektronisk udstyr.
- Dine høreapparater og denne enhed fik en unik kode under tilpasningen. Dette sikrer, at apparatet ikke vil påvirke andres høreapparater.
- TV-Streamer+ må kun repareres af et autoriseret servicecenter.
- Åbning eller ændring af TV-Streamer+ kan beskadige den. Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses ved at følge retningslinjerne for udbedring i afsnittet Fejlfinding i denne brugsanvisning, skal du kontakte din høreapparatspecialist.

Vedligeholdelse

Rengøring

Rengør enheden med en fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmiddel (opvaskemiddel, sæbe etc.) eller opløsningsmiddel til at rengøre apparatet.

Servicering

Apparatet kan ikke serviceres eller repareres hjemme. Kontakt din lokale høreapparatspecialist for hjælp, hvis apparatet ikke fungerer som forventet.

Forbindelsestjekliste

Hvis du ikke kan høre tv'ets eller lydkildens lyd, skal du undersøge følgende:

- Test forbindelsen mellem TV-Streamer+ og høreapparaterne – se "Parring af enhed".
- Test forbindelsen mellem TV-Streamer+ og tv'et eller lydenheden – se "Installation af enhed".
- Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt til TV-Streamer+ og tv'et eller den pågældende lydenhed
- Bekræft, at TV-Streamer+ har strøm – se efter indikatorlyset på TV-Streamer+ – Se "Installation af enhed".

BEMÆRK: Hvis du hører brummen i dine høreapparater efter tilslutning til TV-Streamer+ via lydkablet, skal du gøre følgende for at afhjælpe problemet:

- Tilslut TV-Streamer+ til tv'et via det digitale (optiske) kabel
- Brug en ekstern strømkilde
- Skru op for lyden på tv'et og ned i dine høreapparater.

Tekniske specifikationer

Mål	
Længde x bredde x højde	70,6 x 15,7 x 49,5 mm (2,7 x 0,6 x 1,9")

Driftsbetingelser	
Rækkevidde	Op til 7 meter (23 fod)
Strømforsyning	USB-kompatibel forsyning 5V DC
Trådløs	2,4 GHz
Nominel RF-udgangseffekt	maks. 12,0 dBm
Driftstemperaturområde	5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)

Temperaturforhold	
Opbevaringstemperatur	-25 °C til 70 °C (-13 °F til 158 °F)
Temperaturtest	Enheden er testet under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold på mellem -25 °C og 70 °C i henhold til interne og branchespecifikke standarder.

Regulatoriske oplysninger

Garantier og reparation

TV-Streamer+ er dækket af en begrænset producentgaranti på 12 måneder fra købstidspunktet. Bemærk, at der kan gælde udvidede garantier i dit land. Kontakt din høreapparatspecialist for flere oplysninger.

Hvad dækker garantien?

Alle elektriske komponenter, der på grund af materiale-, fabrikations- eller designmæssige fejl ikke fungerer ved normal brug i løbet af garantiperioden, vil blive udskiftet eller repareret uden beregning for dele eller arbejdskraft, når produktet returneres til købsstedet.

Hvis det konstateres, at produktet ikke kan repareres, kan hele enheden blive udskiftet med en tilsvarende enhed efter gensidig aftale med høreapparatspecialisten og kunden.

Hvad dækker garantien ikke

Fejl eller skade, som opstår på grund af u hensigtsmæssig brug eller vedligeholdelse, forkert brug, uheld, reparationer udført af uautoriseret person, uegnet korroderende miljø eller skade på grund af indtrængen af fremmedlegemer, er IKKE dækket af den begrænsede garanti og kan eventuel gøre den ugyldig. Ovennævnte garanti påvirker ikke dine eventuelle juridiske rettigheder i henhold til gældende national lovgivning vedrørende salg af forbrugsvarer. Din høreapparatspecialist yder muligvis en garanti med mere omfattende dækning end denne begrænsede garanti. Kontakt din høreapparatspecialist for yderligere oplysninger.

Forventet levetid

Den forventede levetid for apparatet er minimum 5 år.

Erklæring

Dette produkt er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne.

Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) dette produkt kan ikke fremkalde skadelig interferens, og (2) dette produkt skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan fremkalde uønskede fejl.

Denne digitale klasse B-enhed overholder de canadiske bestemmelser ICES-003.

Bemærk. Produktet er testet og efterkommer begrænsningerne for klasse B digitalt udstyr i overensstemmelse med del 15 i FCC reglerne. Disse grænser er lavet for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette produkt skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvent energi, og det kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Imidlertid er der ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis produktet forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for produktet, kan du prøve at afhjælp problemet på én eller flere af følgende måder:

- Genindstil eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem produktet og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt eller en anden strømkreds end den, som modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt din forhandler eller en autoriseret radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer kan annullere brugerens bemyndigelse til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder med følgende lovkrav

- I EU: Enheden overholder de generelle sikkerheds- og ydelseskrav i bilag I til EU's forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 (MDR).
- GN Hearing A/S erklærer hermed, at radioudstyrstypen SAS-4 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst for EU's overensstemmelseserklæring fås på følgende internetadresse:
www.declarations.resound.com/en
- I USA: FCC CFR 47 del 15, underafsnit C.

Model: SAS-4; FCC ID: X26SAS-4; IC: 6941C-SAS-4.

Du kan få oplysninger om andre gældende internationale krav i lande uden for EU og USA i de lokale krav for disse områder.

I overensstemmelse med Japanese Radio Law og Japanese Telecommunications Business Law: Enheden er certificeret i henhold til Japanese Radio Law (電波法) og Japanese Telecommunications Business Law (電気通信事業法).

Kildeangivelse

Dele af denne software er skrevet af Kenneth MacKay (micro-ecc) og givet i licens under følgende vilkår og betingelser:

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller i andre materialer, der følger med distributionen.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE "SOM DEN ER" OG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. COPYRIGHTINDEHAVEREN ELLER BIDRAGSYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER LØSELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER TJENESTYDELSER; TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSE) UANSET ÅRSAG OG UANSET ANSVARSTEORI, DET VÆRE SIG INDEN FOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (INKLUSIVE FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER MÅTTE VÆRE BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Notater

Notater

Notater

Fabrikant i overensstemmelse
med EU's forordning om
medicinsk udstyr 2017/745:



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark



Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med apparatet, skal rapporteres til den juridiske producent GN Hearing A/S og den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor brugeren er etableret.